

**NOWOŚĆ W OFERCIE**

APARAT WIELOFUNKCYJNY

# PhysioGo.Lite COMBO



**KONTAKT HANDLOWY**

Michał Chojnacki  
+48 726 777 505  
mchojnacki@astar.eu

Rafał Duraj  
+48 693 607 022  
rduraj@astar.eu

Rafał Smoleń  
+48 660 461 019  
rsmolen@astar.eu

Mariusz Starkowski  
+48 785 707 080  
mstarkowski@astar.eu

Bartosz Zięba  
+48 725 787 010  
bzieba@astar.eu

Jacek Zygmą  
+48 693 608 022  
jzygma@astar.eu

**SKLEP**

[sklep.astar.pl](http://sklep.astar.pl)  
+48 603 660 062  
sklep@astar.eu



ul. Świt 33  
43-382 Bielsko-Biała

t +48 33 829 24 40  
astarmed@astar.eu

[www.astar.pl](http://www.astar.pl)

**ASTAR.**

szczegółowa mapa z podziałem na rejony  
dostępna na [www.astar.pl](http://www.astar.pl)

woj. kujawsko-pomorskie,  
podlaskie, warmińsko-mazurskie

woj. łódzkie, śląskie

woj. małopolskie, mazowieckie

woj. lubuskie, pomorskie,  
zachodniopomorskie, wielkopolskie (część)

woj. lubelskie, świętokrzyskie

woj. dolnośląskie, opolskie, podkarpackie,  
wielkopolskie (część)



wsparcie merytoryczne  
[www.fizjotechnologia.com](http://www.fizjotechnologia.com)



**ASTAR.**

**POLSKI  
PRODUKT**  **WYBIERASZ  
I WSPIERASZ**

# PhysioGo.Lite COMBO



## DODATKI DO URZĄDZENIA

### STANDARDOWE

elektrody 6x6 cm oraz 7,5x9 cm  
pokrowce wiskozowe na elektrody  
pasy rzepowe 40x9 i 100x9 cm

### OPCJONALNE

elektrody samoprzylepne 5x5 cm, 5x10 cm  
elektrody punktowe z adapterem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm  
głowice typ GU-1, GU-5 z uchwytami  
głowica typ SnG z uchwytem  
torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem  
stolik Versa/ Versa X/ Versa XUVC  
bateria

## INTUICYJNA OBSŁUGA

- 5" ekran dotykowy
- intuicyjny i nowoczesny interfejs
- ilustrowana encyklopedia zabiegowa
- statystyki zabiegów
- statystyki akcesoriów

## FUNKCJONALNOŚĆ


- niska waga aparatu
- dedykowana torba mieszcząca urządzenie wraz z akcesoriami
- akumulator (opcjonalnie)

## BEZOBSŁUGOWA GŁOWICA SnG



głowica ultradźwiękowa GU-5

elektrody z pokrowcami wiskozowymi

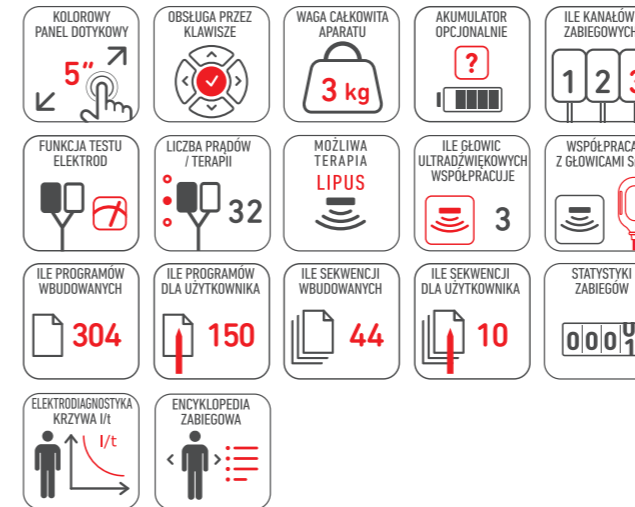

## TERAPIA LIPUS

(low intensity pulsed ultrasound)  
to ultradźwięki o niskiej intensywności z przedziału 0,5 – 3,0 W/cm<sup>2</sup>, emitowane w formie pulsacyjnej:

- średnia moc do 0,1 W/cm<sup>2</sup>
- częstotliwość 1,5 MHz
- cykl pracy 20%
- częstotliwość impulsów 1 kHz

## GŁOWICA SnG

Jest to bezobsługowe akcesorium o dużej powierzchni czoła (17,3 cm<sup>2</sup> lub 34,5 cm<sup>2</sup> w zależności od wybranego trybu działania). Znajduje zastosowanie w klasycznej terapii ultradźwiękami, fonoforezie, terapii LIPUS i zabiegach skojarzonych przy połączeniu z elektroterapią.

## NOWOŚĆ W OFERCIE

## GŁOWICA GU-1

o powierzchni czoła 1 cm<sup>2</sup> wytwarza falę o częstotliwości 1 lub 3 MHz. Stosowana jest do nadźwiękowania niewielkich obszarów ciała w klasycznej sonoterapii, leczeniu metodą LIPUS oraz terapii skojarzonej.

## GŁOWICA GU-5

o powierzchni czoła 5 cm<sup>2</sup> (1 lub 3 MHz) stosowana jest zarówno w sonoterapii, jak i w zabiegach, w których wykorzystuje się fonoforezę. Ten standardowy typ głowicy pozwala także na przeprowadzanie terapii LIPUS oraz terapii skojarzonej.


## WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo urządzenia potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Ponadto, funkcja Autotestu weryfikuje poprawność działania wszelkich komponentów przy każdym uruchomieniu, wyświetlając komunikaty w razie wykrycia jakichkolwiek błędów.

PhysioGo Lite COMBO jest lekki i może pracować na zasilaniu akumulatorowym, a specjalnie zaprojektowana, wygodna torba pomieści aparat oraz jego akcesoria.

## BAZA PROGRAMÓW WBUDOWANYCH

Urządzenie ma wbudowaną bogatą encyklopedię gotowych procedur terapeutycznych przypisanych do poszczególnych schorzeń oraz pozwala na tworzenie własnej listy programów użytkownika.

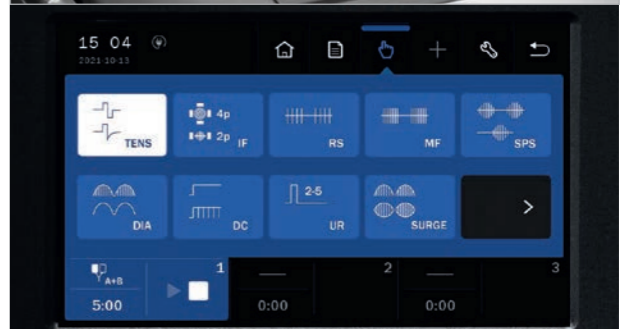

## TRYB MANUALNY

Pozwala na samodzielne definiowanie parametrów zabiegowych.

głowice ultradźwiękowe GU-5 i GU-1

